


Unistik® 3

Vorgespannte Sicherheits-
lanzette zum Einmalgebrauch
Comfort Zone Technology® –
zur schmerzarmen kapillaren Blutentnahme

An der Vorderseite des Lanzettenkörpers, der zur Blutabnahme gegen die Haut gedrückt wird, befinden sich 8 kleine Erhöhungen, welche beim Anpressen an die Haut die Nervenenden irritieren. Das Signal, welches an das Gehirn geleitet wird, reduziert die Schmerzwahrnehmung.

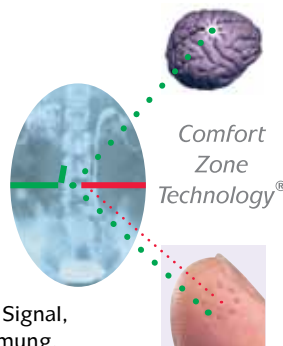

Die Unistik 3 – Einmal Sicherheitslanzetten sind für alle klinischen Bereiche geeignet und in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Unistik® 3 Comfort

PZN 3802421

Durchmesser: 28G (0,375 mm)
Eindringtiefe: 1,8 mm
Durchschnittliches Blutvolumen 5 µl - 30 µl
Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Alle Kapillarblutuntersuchungen, für die eine kleinere Blutmenge ausreicht.
Packung mit je 100 Einheiten: AT1042



Unistik® 3 Normal

PZN 3802409

Durchmesser: 23G (0,66 mm)
Eindringtiefe: 1,8 mm
Durchschnittliches Blutvolumen 30 µl - 75 µl
Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Durch höhere Blutmenge besonders geeignet für Bluttransfusionszentren und Blutspendedienste, aber auch für Cholesterinbestimmungen und alle anderen Routinebestimmungen.
Packung mit je 100 Einheiten: AT1002



Unistik® 3 Extra

PZN 3802444

Durchmesser: 21G (0,81 mm)
Eindringtiefe: 2,0 mm
Durchschnittliches Blutvolumen 75 µl - 125 µl
Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Besonders geeignet für die Kapillarblutgewinnung bei Patienten mit z.B. Hornhaut- oder Hautverdickungen sowie alle Untersuchungen, die eine höhere Blutmenge erfordern.
Packung mit je 100 Einheiten: AT1012



Unistik® 3 Neonatal & Laboratory

PZN 3802438

Durchmesser: 18G (1,2 mm)
Eindringtiefe: 1,8 mm
Durchschnittliches Blutvolumen ≥ 200 µl
Vorgeschlagene Anwendungsbereiche:
Speziell zur Kapillar-/Fersenblutgewinnung bei Früh- und Neugeborenen. Besonders auch zur Durchführung von Blutgasanalysen etc. geeignet. Die Lanzettenspitze dieser Version ist im Gegensatz zu den anderen Versionen klingenförmig geschliffen.
Packung mit je 100 Einheiten: AT1052



Wie benutzt man den Unistik® 3 ... einfach drehen

Nehmen Sie den Unistik 3 in die Hand und drehen Sie die Schutzkappe der Lanzette einfach ab. – Nicht ziehen, einfach nur drehen –. Entsorgen Sie die Schutzkappe.



... Blutentnahme

Wählen Sie einen Entnahmebereich wie z.B. auf den Bild-Darstellungen A und B vorgeschlagen. Drücken Sie die Vorderseite des Lanzettenkörpers gegen die gewählte Blutentnahmestelle und lösen Sie durch Druck auf den seitlichen Auslöseknopf den Einstich aus.

(Wenn erforderlich, massieren Sie die Einstichseite vor der Punktion leicht.)

Die Lanzette verschwindet nach dem Einstich sofort wieder im Lanzettenkörper und vermeidet damit zuverlässig das Risiko einer Verletzung/Kontamination.

Unistik 3 kann nach Gebrauch nicht erneut gespannt werden. Der Versuch dies zu tun zerstört sofort die Mechanik und verhindert dadurch evtl. Missbrauch zuverlässig.

